
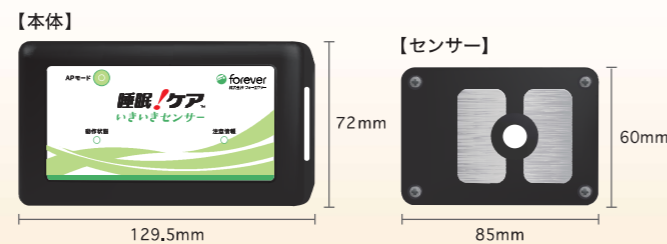


みまもりサービス with いきいきセンサー

機能

機能名	内容
リアルタイム計測	いきいきセンサーにより、約5秒間隔で計測します
心拍数	BCGによる心拍変動解析で、心拍数を計測します
呼吸数	BCGによる呼吸変動解析で、呼吸数を計測します
体動	センサーにかかる荷重の変動により、計測します
通知機能	認定された状態を検知し、スマートフォン、PCに通知します
離床・臥床	ベッドから離れた状態が一定時間経過した際に通知します
個人別検知認定	通知機能を作動させる時間帯や心拍数・呼吸数の正常範囲などを個人別に設定します
統計・検索機能	過去に計測・蓄積したデータを統計表示、指定期間で検索表示します
心拍数	心拍数の変化をグラフ表示します
呼吸数	呼吸数の変化をグラフ表示します
体動	体動の変化をグラフ表示します
睡眠状態	深い睡眠、浅い睡眠、覚醒をグラフ表示し、睡眠レベルを評価します
レポート出力	日々の状態を参考にご利用いただけます
月間睡眠統計	グラフで表示
平均心拍数	月の平均心拍数を表示
平均呼吸数	月の平均呼吸数を表示
今後の搭載予定	
ナースコール通知 睡眠時無呼吸状態検知 離床後の退室監視 心拍数異常 呼吸数異常	

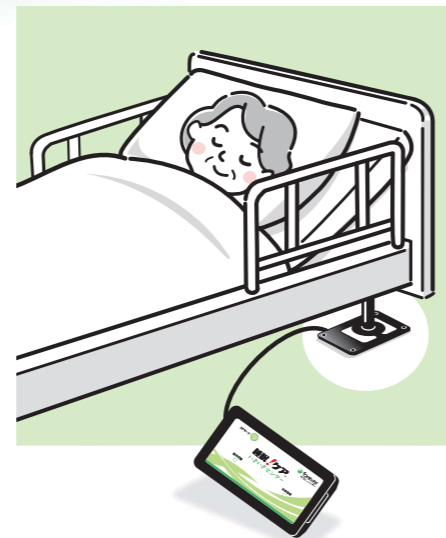

製品情報

製品/サービス名	みまもりサービス with いきいきセンサー
● いきいきセンサー	
設置方法	ベッドの足下一か所(頭側)
サイズ	本体 129.5mm×72mm 厚さ16mm センサー 85mm×60mm 厚さ8mm
電源	AC100V240V 50/60HZ
適用温度	0℃~40℃
適用湿度	95%未満
通信方式	Wi-Fi 5-802.11 a/b/g/n/ac 接続
技術適合認定	201-180629
● 福祉用具 TAISコード	02074-000001

● 推奨システム	
管理用PC	
OS	Windows10以上
ブラウザ	Google Chrome Ver 78以上
管理用タブレット	
Android OS	Android8.0以上
iOS	iOS14.0以上
ブラウザ	Google Chrome Ver 78以上
スマートフォン	
Android OS	Android8.0以上
iOS	iOS14.0以上

ベッドの脚に敷いて、見守り開始。

# いきいきセンサー



体調の変化をすばやくキャッチ!  
やすらぎの計測。

離床

24

睡眠

心拍

呼吸

開発・販売元

**forever**  
株式会社 フォーエヴァー

〒531-0072  
大阪府大阪市北区豊崎5-6-10 商業ビル4F  
TEL:06-6486-1054 FAX:06-6486-1052  
<https://www.fvr.co.jp/ikiiki/>  
E-mail: ikiiki@fvr.co.jp



製造元

**株式会社 アサヒ電子研究所**

〒541-0045  
大阪府大阪市中央区道修町3-3-3  
TEL:06-6222-3233 FAX:06-6222-7216  
<https://www.aelnet.co.jp>

**forever**  
株式会社 フォーエヴァー

# みまもりサービス with いきいきセンサー

日々の生活を、離れてみまもる！  
すこやかな日常。

## サービスの特徴

- ベッドの足に敷く、非接触型  
心拍、呼吸、睡眠の状態をみまもります
- 睡眠を見える化  
睡眠を統計的に見ることで健康をみまもります
- 施設の管理者、ご家族への通知  
利用者さんの『万が一』をPC、スマホへ瞬時に通知します



- 見守るご家族に安心の提供  
月別、週別とデータ統計の閲覧、帳票出力をすることができます  
睡眠を知ることで健康状態の把握と予防ができます



【月間】

【週間1p】

【週間2p】

家族にとつて  
いい知らせ  
ない知らせ



いきいきセンサーで  
ゆとりある  
安心の暮らし

## いきいきセンサー

### ご利用イメージ



### サービスの利用メリット

- 睡眠状態を知ることによって医師への相談などにも役立ちます
- 介護者間で情報共有することでサービスの向上やプランの変更に役立ちます
- 見回りの負担を減らすことができ、安眠の妨げをなくせます
- お持ちのPC、スマホをご利用いただけます